


PLUSCONNECT
Wireless Weight Scale
UC-350CNBLE


ENGLISH

1. Initialize and install the batteries.

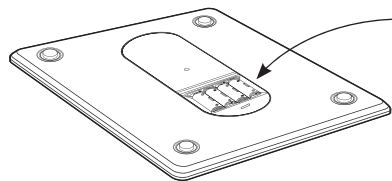

Insert the included batteries into the battery compartment

2. Download the free "A&D Connect" app.

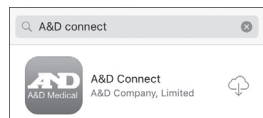

3. Account registration, device setup and pair-up.

Follow the A&D Connect app instructions for account registration and device setup/connection process.

Account registration

(Create an account; App will save your data on your account and calculate your BMI)



Guest mode

(Reading is saved on device memory but not in your account)

3a. Device setup


Select UC-350BLE from device setup screen.



UC-350BLE
Weight Scale


3b. Pair-up

Ensure the *Bluetooth*® function of the mobile device is ON. Press and hold UNIT button in the back of the scale to start pair-up.

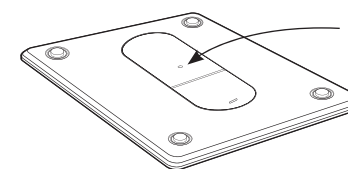

UNIT and Pair-up Activation Button Sensor

Symbol and symbol will be shown on the LCD alternatively, indicating pair-up is proceeding.

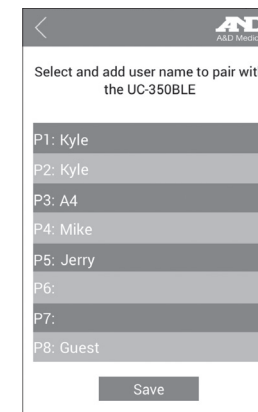

Select User ID among P1 to P7.

NOTE: Remember your "P#" to ensure data is stored under correct user.

Symbol will appear on the LCD, if pairing is successful.

See the manual for more details.

4. Start measuring

Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User should select “P8”.

- On the scale, press and hold “SET” button for about 3s to enter setting mode. Once “P1” flashes, press the function button ▲ or ▼ to select your “P#” among P1 to P8. Press “SET” button to lock it.
- Step on the platform when the scale displays “0.0”. Stand still until the unit (lb/kg) stop flashing.
- A beep sound will indicate to step off and the scale will display your weight value.
- Data transmission will process automatically if paired successfully.

Refer to Data Transmission in the manual for more details.



5. Multiuser

- Up to 8 people can use and store reading on the scale.
- **Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User should select “P8”.**
- Follow the steps above to start measuring.

6. Offline measurement

Even when you don't have your phone, the weight data is stored in your ID memory and transmitted next time the scale is connected with your phone (max 30 memory).

Be sure to select your “P#” on the scale. Guest User should select “P8”.

- Position the scale on a flat, hard surface.
- Step onto the scale platform and remain still until the unit (lb/kg) stop flashing.
- A beep sound will indicate to step off and the scale will display your weight value
- The scale will automatically turn off after a few seconds.



Manufactured by:
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi,
Saitama, 364-8585 Japan
www.aandd.jp
81-48-593-1119

Manufactured for:
A&D Engineering, Inc.
Automation Parkway
San Jose, CA 95131 É.-U.
www.andmedical.com
1-888-726-9966

Distributed by:
Auto Control Médical
6695 Millcreek Dr., Unit 6
Mississauga, ON, L5N 5R8 Canada
www.lifeforcecanada.com
1-800-461-0991

AND
A&D Medical


1-888-726-9966 • www.andmedical.com

©A&D Medical. All rights reserved. iPad, iPhone and iPod are trademarks of Apple, Inc. Android and Google play are trademark of Google, Inc. Specifications subject to change without notice.

Balance sans fil
PLUSCONNECT
UC-350CNBLE


FRANÇAIS

1. Initialisation et installation des piles.

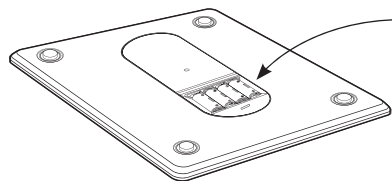

Insérez les piles incluses dans le compartiment à piles.


2. Télécharger l'application gratuite « A&D Connect ».

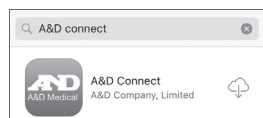

3. Enregistrement du compte, configuration de l'appareil et jumelage.

Suivez les instructions de l'application A&D Connect pour l'enregistrement du compte et le processus de configuration/ connexion de l'appareil.

Enregistrement du compte
(créez un compte ; l'application enregistrera vos données dans votre compte et calculera votre IMC)

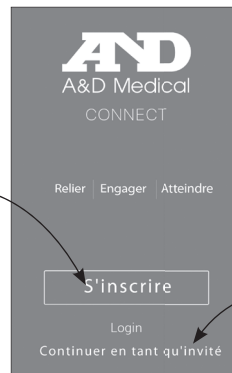

Mode Invité
(les relevés sont enregistrés dans la mémoire de l'appareil, mais pas dans votre compte)

3a. Configuration de l'appareil


Sélectionnez UC-350BLE dans l'écran de configuration de l'appareil.



Balance
UC-350BLE


3b. Jumelage

Vérifiez que la fonction *Bluetooth^{MD}* de l'appareil mobile est bien activée. Maintenez enfoncé le bouton UNIT (unité) au dos de la balance pour démarrer le jumelage.

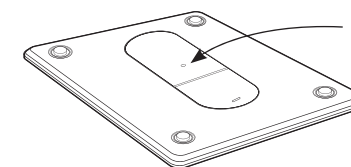

Bouton UNIT (unité) et bouton d'activation du mode Jumelage

Les symboles \cup^{\cup} et \cup^{\cup} sont affichés en alternance sur l'écran ACL pour indiquer que le jumelage est en cours.

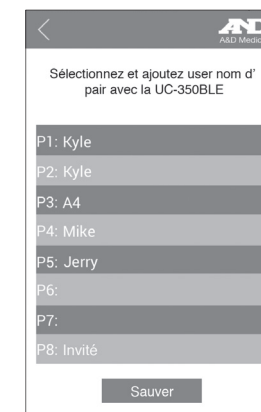

Dans l'application, sélectionnez un nom d'utilisateur entre P1 et P7.

REMARQUE : prenez note de votre « P# » pour vous assurer que les données sont enregistrées pour le bon utilisateur.

Le symbole [] apparaît sur l'écran ACL en cas de réussite du jumelage.

Consultez le manuel pour plus d'informations.

4. Commencer à mesurer

Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».

- Sur la balance, maintenez le bouton SET (réglage) enfoncé pendant environ 3 secondes pour entrer en mode Réglage. Quand « P1 » clignote, appuyez sur le bouton de fonction ▲ ou ▼ pour sélectionner votre « P# » pouvant aller de P1 à P8. Appuyez sur le bouton SET (réglage) pour le conserver.
- Montez sur la plateforme quand la balance affiche « 0.0 ». Restez immobile jusqu'à ce que l'unité (lb/kg) cesse de clignoter.
- Un bip se fait entendre pour vous demander de descendre, et votre poids s'affiche sur la balance.
- La transmission des données se fait automatiquement en cas de jumelage réussi.

Reportez-vous à *Transmission des données dans le manuel pour plus d'informations.*



5. Utilisateurs multiples

- Jusqu'à 8 personnes peuvent utiliser la balance et y enregistrer des mesures.
- **Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».**
- Suivez les étapes ci-dessus pour commencer la pesée.

6. Mesures hors ligne

Si vous n'avez pas votre téléphone sur vous, les données de pesée sont enregistrées dans la mémoire de votre ID et seront transmises lors de la prochaine connexion entre la balance et votre téléphone (30 mesures en mémoire maximum).

Pensez à sélectionner votre « P# » sur la balance. Les utilisateurs invités doivent sélectionner « P8 ».

- Posez la balance sur une surface plane et solide.
- Montez sur la plateforme et restez immobile jusqu'à ce que l'unité (lb/kg) cesse de clignoter.
- Un bip se fait entendre pour vous demander de descendre, et votre poids s'affiche sur la balance.
- La balance s'éteint automatiquement après quelques secondes.



Fabriqué par:
A&D Company, Limited
1-243 Asahi, Kitamoto-shi,
Saitama, 364-8585 Japan
www.aandd.jp
81-48-593-1119

Fabriqué pour:
A&D Engineering, Inc.
Automation Parkway
San Jose, CA 95131 É.-U.
www.andmedical.com
1-888-726-9966

Distribué par:
Auto Control Médical
6695 Millcreek Dr., Unit 6
Mississauga, ON, L5N 5R8 Canada
www.lifeforcecanada.com
1-800-461-0991

AND
A&D Medical

1-888-726-9966 • www.andmedical.com

©A&D Medical. Tous droits réservés. iPad, iPhone et iPod sont des marques de commerce d'Apple inc. Android et Google Play sont des marques de commerce de Google inc. Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.